


NEXOPART EML 200 Pure

Das Basismodell für Standardanalysen

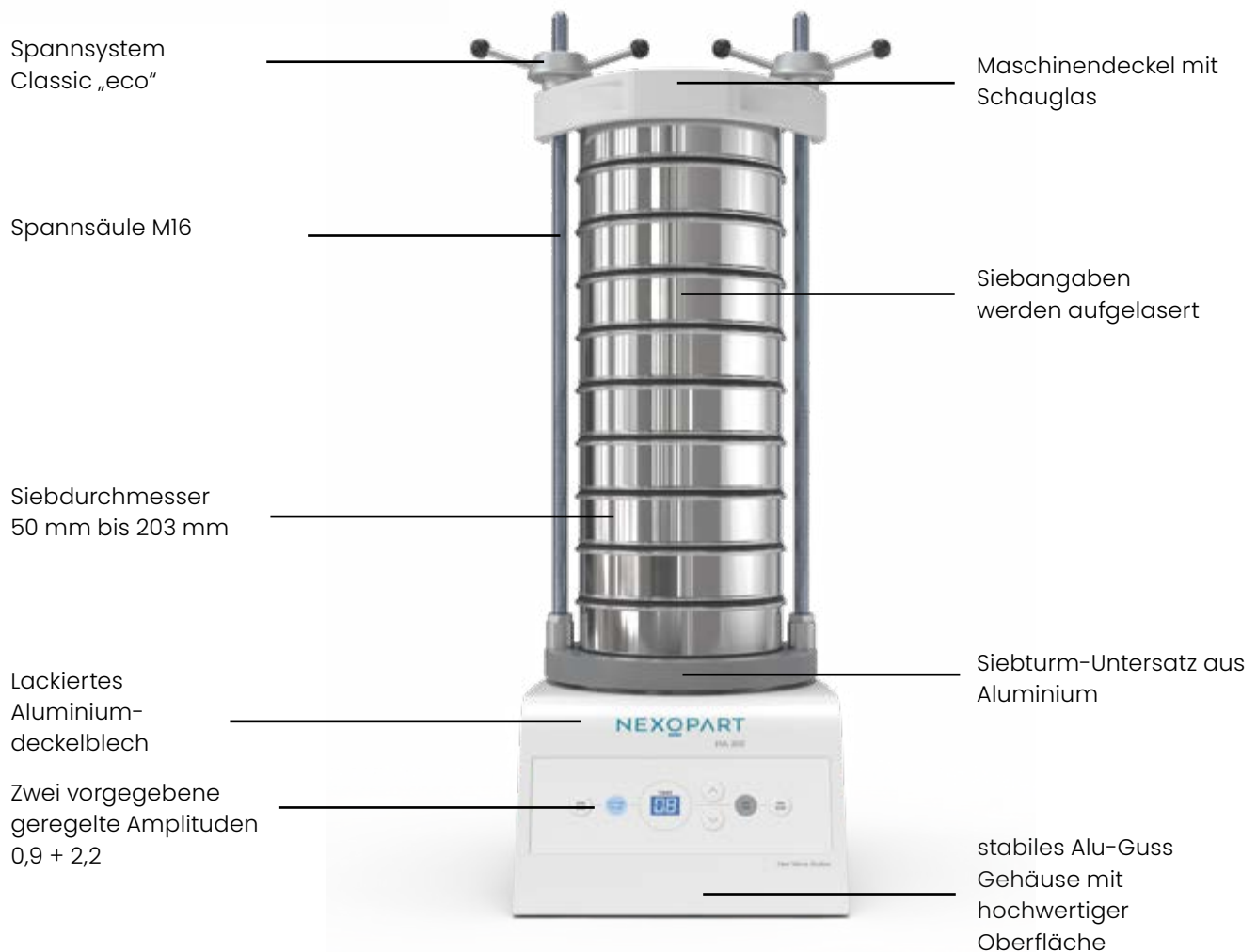

NEXOPART EML Pure:

Das Basismodell für Standardanalysen – Bewährte NEXOPART Qualität zu einem günstigen Preis.

NEXOPART

simplicity for your lab

Produkteigenschaften

ANTRIEB/ STEUERUNG

- Zwei vorgegebene geregelte Amplituden zur Auswahl (fein 0,9 und grob 2,2)
- Selbsttätig nachregulierende Amplitude
- Festgelegtes Intervall (10 sec)
- Digitaler Timer
- Netzspannungs- und frequenzunabhängig
- Kalibrierbares Prüfmittel nach ISO 9001

GEHÄUSE

- Hochwertige Oberfläche
- gegossenes Alu-Guss Gehäuse
- Deckelblech und Siebturmuntersatz aus Aluminium
- Überarbeitetes und verbessertes Dämpfungssystem – Schwingungsübertragung an den Untergrund wird verringert

DESIGN

- Schlanke und schlichte Form – perfekt für den Laborbereich

BEDIENBARKEIT

- Ist die Maschine angestellt und grob oder fein gewählt, kann die Siebung sofort beginnen

ZERTIFIKAT

- Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10 204 gegen Gebühr
- IQ/OQ-Dokumentation gegen Gebühr

Siebbeladung

Sieb Ø	Nutzhöhe	Adapterset	max. Siebanzahl
50	25	207885127	19
76,2	25	205323676	19
100	45	205323577	10
120	40	211214340	11
150	50	205323591	9
200	32		15
200	50		9
203	32		15
203	50		9



NEXOPART

simplicity for your lab

TECHNISCHE DATEN AUF EINEN BLICK.

	EML 200 Pure	EML 200 Premium	EML 200 Premium Remote
Analyseverfahren	Siebung	Siebung	Siebung
Messbereich	20 µm - 125 mm	20 µm - 125 mm	20 µm - 125 mm
max. Siebgutauflage	ca. 3 kg	ca. 3kg	ca. 3kg
Siebturmgewicht	max. 8,7 kg	max. 8,7 kg	max. 8,7 kg
Siebdurchmesser	50 mm - 203 mm	50 mm - 203 mm	50 mm - 203 mm
Trocken-Siebung	ja	ja	ja
Nass-Siebung	nein	nein	ja
Netzspannung	110 - 230 V, 50 - 60 Hz	110 - 230 V, 50 - 60 Hz	110 - 230 V, 50 - 60 Hz
Amplitude	fein 0,9 und grob 2,2	frei wählbar bis 3 mm	frei wählbar bis 3 mm
Amplitudenregelung	geregelt und selbsttätig nachregulierend	geregelt und selbsttätig nachregulierend	geregelt und selbsttätig nachregulierend
Timer	0-99 Minuten / Dauerbetrieb	0-99 Minuten / Dauerbetrieb	0-99 Minuten / Dauerbetrieb
Betriebsart	Intervall	Intervall / Kontinuierlich	Intervall / kontinuierlich
Intervall	fest, 10 sec.	einstellbar	einstellbar
Programmspeicherplätze	nein	01-49	01-49
Kalibrierbares Prüfmittel	ja, nach ISO 9001	ja, nach ISO 9001	ja, nach ISO 9001
Schnittstelle	nein	ja	ja
Abmessung B x T x H	385 x 295 x 895 mm	385 x 295 x 875 mm	385 x 295 x 875mm
Gewicht	37 kg, netto	37 kg, netto	40 kg, netto
Farbe	RAL 9010, reinweiß	RAL 9010, reinweiß	RAL 9010, reinweiß
Bestellnummer	205322921 (Classic „eco“)	205323003 (Classic) 205322938 (TwinNut)	205323034 (Classic) 205322945 (TwinNut)

NEXOPART GmbH & Co. KG

A Haver & Boecker and Hosokawa Alpine Company

Ennigerloher Str. 64
59302 Oelde
Germany

sales@nexopart.com

www.nexopart.com

DB 40 D 04 122025 EML 200 Pure PDF NEXOPART®.

Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung.

Als innovatives Unternehmen schützt Nexopart® sein geistiges Eigentum. Das Knowhow NEXOPART® ist durch folgende Schutzrechte geschützt:

Wortmarke NEXOPART in dem Schutzbereich DE (30 2022 110 345), IR UK (WCO0000001740397), IR EU (1740397) und IR US (7,525,699).

W.S. TYLER® und RO-TAP® sind Marken und eingetragene Marken der Haver Tyler Corporation.

Photos: supervisuell

