


NEXOPART EML 450 digital plus T

Für die Trockensiebung

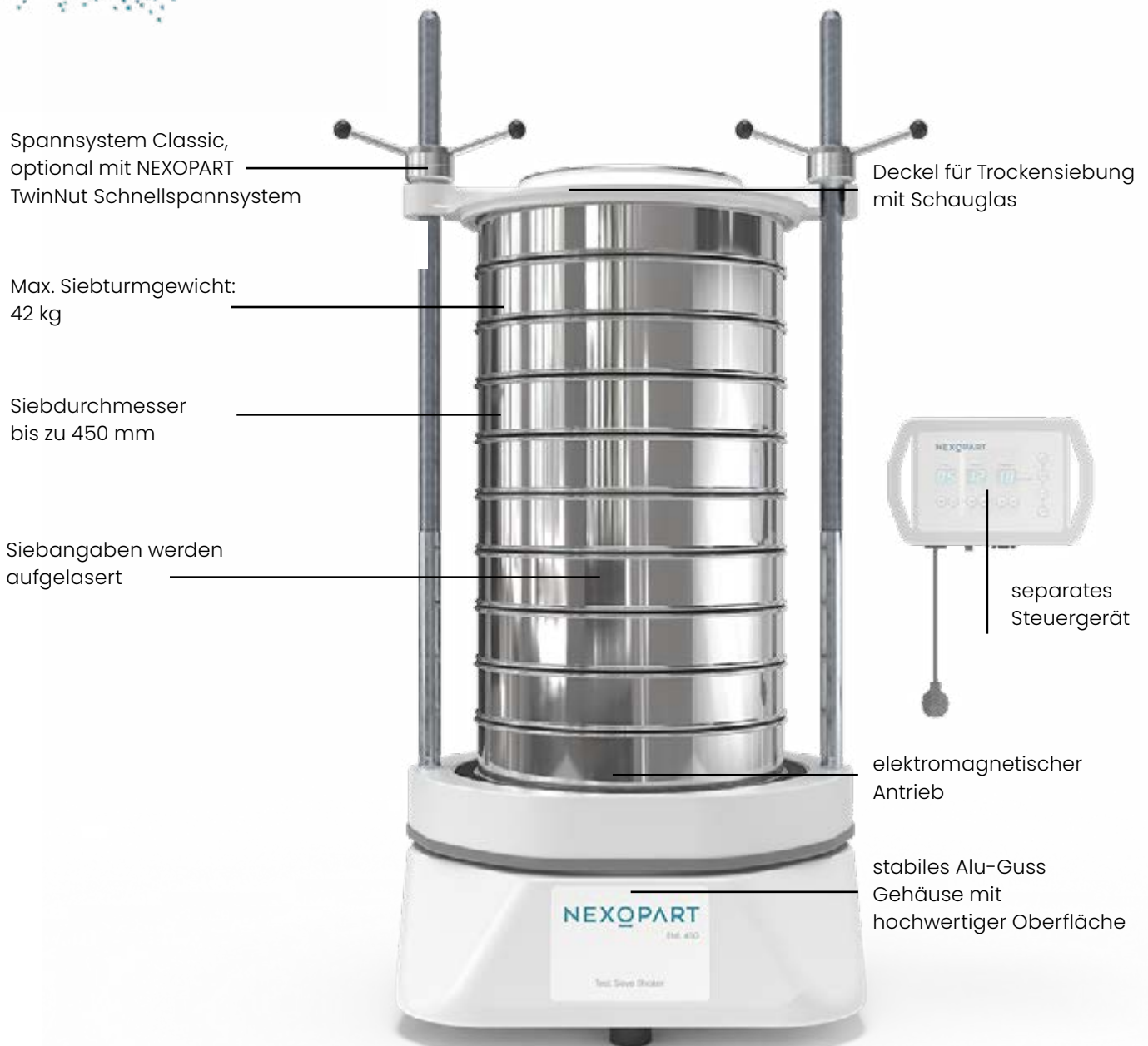

NEXOPART EML 450 dp T:

Die 3D Laborsiebmaschine für bis zu 15 kg Schüttgut.

NEXOPART

simplicity for your lab



Produkteigenschaften

ANTRIEB/STEUERUNG

- Selbsttätig nachregulierende Amplitude
- Zwangsgesteuerte dreidimensionale Siebbewegung
- Elektromagnetischer Antrieb
- Separates Steuergerät, an der Wand fixierbar
- 3.000 Impulse pro Minute (50 Hertz)
- Kalibriertes Messinstrument nach ISO 9001

GEHÄUSE

- Stabiles Aluminiumgehäuse

NUTZUNG

- Nutzung unterschiedlicher Siebdurchmesser und Reduzierstücke möglich.

Folgende Durchmesser können verwendet werden:

450/ 400/ 350/ 315/ 305/ 300 mm ohne weiteres Zubehör

250 mm mit Reduzierstück: 206829504

200/ 203 mm mit Reduzierstück: 205323386

Hinweis: Mit entsprechendem Zubehör kann die Maschine auch zur Nasssiebung genutzt werden.
Zur Nasssiebung werden für die Siebpfannen < 400 mm Untersätze benötigt, da sonst die Ausläufe auf dem Schwingteller aufliegen.

BEDIENBARKEIT

- Speicherplätze für 10 Siebprogramme

ZERTIFIKATE

- Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10 204 gegen Gebühr
- IQ/OQ-Dokumentation gegen Gebühr

DESIGN

- Robuste und solide form



Siebbeladung

Sieb Ø	Nutzhöhe	Adapterset	max. Siebanzahl
203	50	205323386	15
203	32	205323386	24
200	50	205323386	15
200	32	205323386	24
250	55	206829504	14
300	60		13
300	30		25
305	60		13
315	75		11
350	60		13
400	65		13
450	70		11

NEXOPART

simplicity for your lab

TECHNISCHE DATEN AUF EINEN BLICK.

	EML 450 digital plus T	EML 450 digital plus N
Analyseverfahren	Siebung	Siebung
Messbereich	20 µm – 125 mm	20 µm – 125 mm
max. Siebgutauflage	ca. 15 kg	ca. 15 kg
Siebturmgewicht	max. 42 kg	max. 42 kg
Siebdurchmesser	200 mm – 450 mm	200 mm – 450 mm
Trockensiebung	ja	ja
Nasssiebung	nein	ja
Netzspannung	110 V, 50 – 60 Hz 230 V, 50 – 60 Hz	110 V, 50 – 60 Hz 230 V, 50 – 60 Hz
Amplitude	frei wählbar bis 2 mm	frei wählbar bis 2 mm
Amplitudenregelung	konstant und selbsttätig nachregulierend	konstant und selbsttätig nachregulierend
Timer	0-99 Minuten / Dauerbetrieb	0-99 Minuten / Dauerbetrieb
Betriebsart	Intervall / konstant	Intervall / konstant
Intervall	einstellbar	einstellbar
Programmspeicherplätze	01-10	01-10
Kalibriertes Prüfmittel	ja, nach ISO 9001	ja, nach ISO 9001
Schnittstelle	ja	ja
Abmessung B x T x H	585 x 575 x 1300 mm	585 x 575 x 1300 mm
Größe	135 kg, netto	135 kg, netto
Farbe	RAL 9003, signalweiß	RAL 9003, signalweiß
Bestellnummer	205322631 (Classic, 230 V, 50-60 Hz) 205322662 (Classic, 110 V, 50-60 Hz) 205322815 (NEXOPART TwinNut, 230 V, 50-60 Hz) 205322822 (NEXOPART TwinNut, 110 V, 50-60 Hz)	205322648 (Classic, 230 V, 50-60 Hz) 205322839 (NEXOPART TwinNut, 230 V, 50-60 Hz)

NEXOPART GmbH & Co. KG

A Haver & Boecker and Hosokawa Alpine Company

Ennigerloher Str. 64
59302 Oelde
Germany

sales@nexopart.com

www.nexopart.com

DB 44 D 03 122025 EML 450dp T PDF NEXOPART®.

Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung.
Als innovatives Unternehmen schützt Nexopart® sein geistiges Eigentum. Das Knowhow NEXOPART® ist durch folgende Schutzrechte geschützt:
Wortmarke NEXOPART in dem Schutzraum DE (30 2022 110 345), IR UK (WO00000001740397), IR EU (1740397) und IR US (7,525,699).
W.S. TYLER® und RO-TAP® sind Marken und eingetragene Marken der Haver Tyler Corporation.
Photos: Walkenhorst

