


NEXOPART EML 315 digital plus N

Für die Nasssiebung

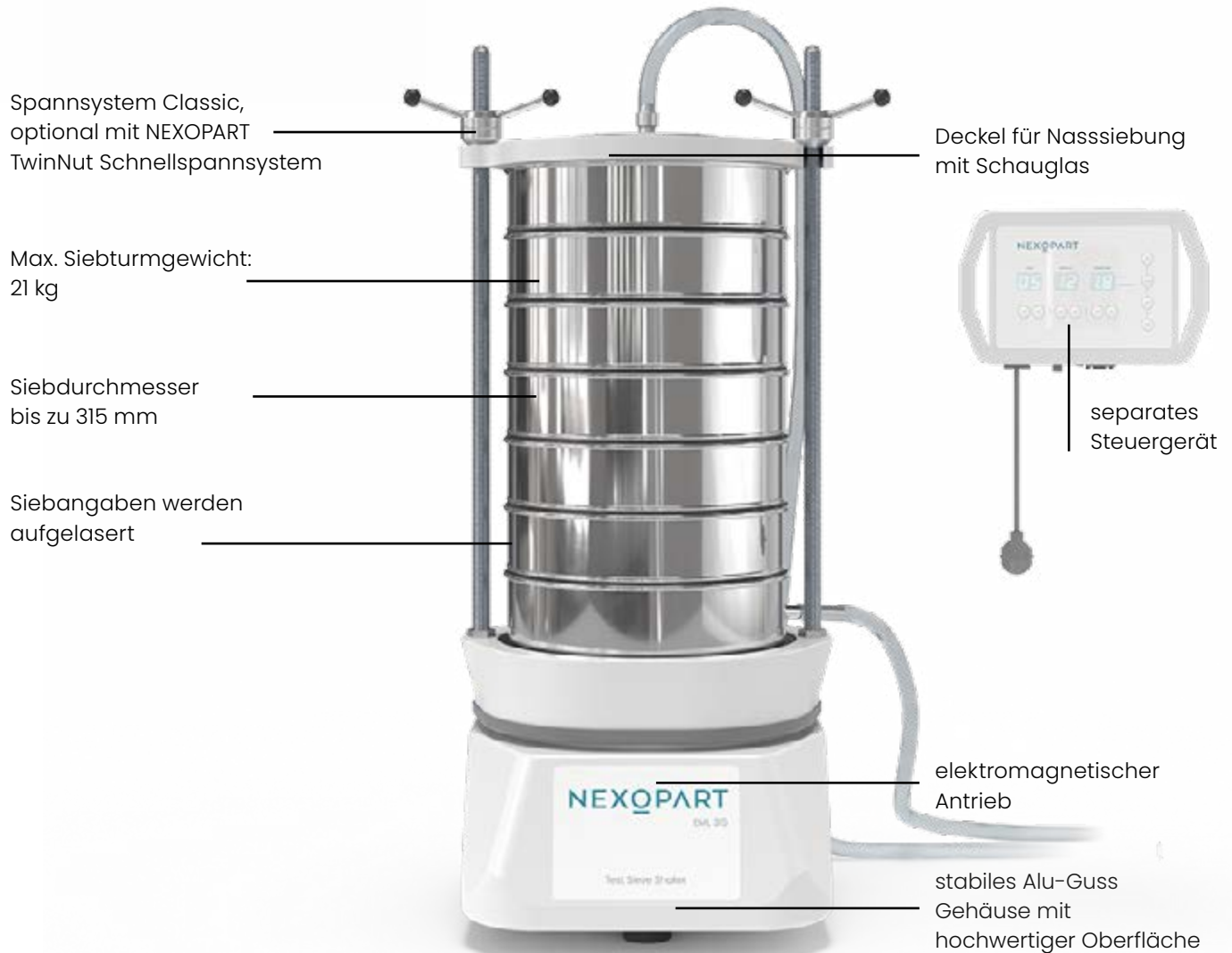

Spannsystem Classic,
optional mit NEXOPART
TwinNut Schnellspannsystem

Deckel für Nasssiebung
mit Schauglas

Max. Siebturmgewicht:
21 kg

Siebdurchmesser
bis zu 315 mm

Siebangaben werden
aufgelasert

separates
Steuergerät

elektromagnetischer
Antrieb

stabiles Alu-Guss
Gehäuse mit
hochwertiger Oberfläche

NEXOPART EML 315 dp N:

Die 3D Laborsiebmaschine für bis zu 6 kg Schüttgut.

NEXOPART

simplicity for your lab



Produkteigenschaften

ANTRIEB/STEUERUNG

- Selbsttätig nachregulierende Amplitude
- Zwangsgesteuerte dreidimensionale Siebbewegung
- Elektromagnetischer Antrieb
- Separates Steuergerät, an der Wand fixierbar
- 3.000 Impulse pro Minute (50 Hertz)
- Kalibriertes Messinstrument nach ISO 9001

GEHÄUSE

- Stabiles Aluminiumgehäuse

NUTZUNG

- Nutzung unterschiedlicher Siebdurchmesser und Reduzierstücke möglich.

Folgende Durchmesser können verwendet werden:

315 mm für Deckel 205323423 + 205323409 ohne weiteres Zubehör

305/ 300 mm für Deckel 205323416 + 205323430 ohne weiteres Zubehör

Hinweis: Zur Nasssiebung werden für die Siebpfannen < 300 mm ebenfalls Untersätze benötigt, da sonst die Ausläufe auf dem Schwingteller aufliegen.

BEDIENBARKEIT

- Speicherplätze für 10 Siebprogramme

ZERTIFIKATE

- Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10 204 gegen Gebühr
- IQ/OQ-Dokumentation gegen Gebühr

DESIGN

- Schlank und schlichte Form – perfekt für den Laborbereich



Siebbeladung

Sieb Ø	Nutzhöhe	max. Siebanzahl
200	32	16
200	50	10
203	32	16
203	50	10
250	55	9
300	60	8
300	30	15
305	60	8
315	75	6

NEXOPART

simplicity for your lab

TECHNISCHE DATEN AUF EINEN BLICK.

EML 315 digital plus T		EML 315 digital plus N
Analyseverfahren	Siebung	Siebung
Messbereich max. Siebgutaufgabe Siebturmgewicht Siebdurchmesser Trockensiebung Nasssiebung	20 µm – 125 mm ca. 6 kg max. 21 kg 200 mm – 315 mm ja nein	20 µm – 125 mm ca. 6 kg max. 21 kg 200 mm – 315 mm ja ja
Netzspannung	110 V, 50 – 60 Hz 230 V, 50 – 60 Hz	110 V, 50 – 60 Hz 230 V, 50 – 60 Hz
Amplitude Amplitudenregelung	frei wählbar bis 2 mm konstant und selbsttätig nachregulierend	frei wählbar bis 2 mm konstant und selbsttätig nachregulierend
Timer	0–99 Minuten / Dauerbetrieb	0–99 Minuten / Dauerbetrieb
Betriebsart Intervall Programmspeicherplätze	Intervall / konstant einstellbar 01–10	Intervall / konstant einstellbar 01–10
Kalibriertes Prüfmittel Schnittstelle	ja, nach ISO 9001 ja	ja, nach ISO 9001 ja
Abmessung B x T x H Gewicht Farbe	404 x 440 x 1000 mm 55 kg, netto RAL 9003, signalweiß	404 x 440 x 1000 mm 55 kg, netto RAL 9003, signalweiß
Bestellnummer	205322679 (Classic, 230 V, 50–60 Hz) 205322686 (Classic, 110 V, 50–60 Hz) 205322778 (NEXOPART TwinNut, 230 V, 50–60 Hz) 205322785 (NEXOPART TwinNut, 110 V, 50–60 Hz)	205322693 (Classic, 230 V, 50–60 Hz) 205322709 (Classic, 110 V, 50–60 Hz) 205322792 (NEXOPART TwinNut, 230 V, 50–60 Hz) 205322808 (NEXOPART TwinNut, 110 V, 50–60 Hz)

NEXOPART GmbH & Co. KG

A Haver & Boecker and Hosokawa Alpine Company

Ennigerloher Str. 64
59302 Oelde
Germany

sales@nexopart.com
www.nexopart.com

DB 43 D 03 122025 EML 315dp N PDF NEXOPART®.

Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung.
Als innovatives Unternehmen schützt Nexopart® sein geistiges Eigentum. Das Knowhow NEXOPART® ist durch folgende Schutzrechte geschützt:
Wortmarke NEXOPART in dem Schutzraum DE (30 2022 110 345), IR UK (WO00000001740397), IR EU (1740397) und IR US (7,525,699).
W.S. TYLER® und RO-TAP® sind Marken und eingetragene Marken der Haver Tyler Corporation.
Photos: Walkenhorst

