

990 G.GS

Beschreibung

Der mobile Gasabzug 990G.GS mit Filter entfernt gas- und partikelförmige Schadstoffe auf einfache und effiziente Weise vom Arbeitsplatz und schützt sowohl Benutzer als auch Umgebung. Da der Abzug mit einem Filtersystem arbeitet, ist eine Ausleitung der Luft mit Rohren nicht erforderlich.


Er erfüllt folgenden Normen: BS 7258, CSAZ 316.5, AFNOR NF X 15-211 (Klasse II), EN-1822, EN-779, EN-141, UNE EN ISO 9001:2000.

Einsatz

Allgemeine chemische Arbeiten mit geringen Mengen an Chemikalien bei gemässiger oder Raumtemperatur.

- AnalySELaboratorien
- Forschungslaboratorien
- Labore zur Qualitätskontrolle
- Klinische Laboratorien
- etc.

Technische Eigenschaften

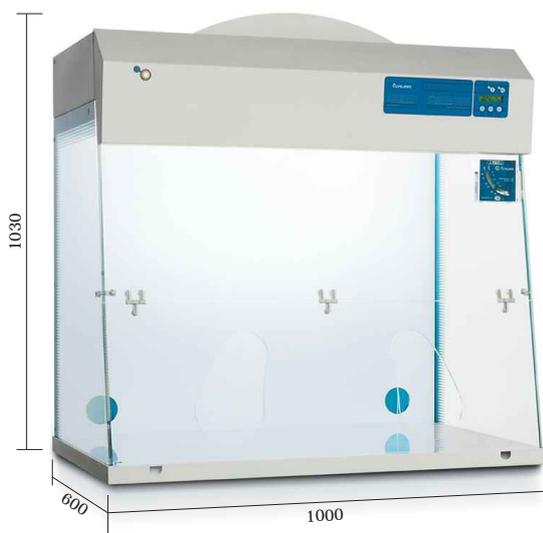

	G	GS
Behandelte Luft (m ³ /h)	175	170
Luftgeschwindigkeit (m/s)	0,50	0,50
Innenvolumen (m ³)	0,361	0,361
Lufterneuerung pro Min.	8,1	7,8
Gesamtstromverbrauch (W)	95	95
Spannungsfrequenz (V-Hz)	220-50	220-50
Beleuchtung: Philips PLL (W)	36	36
Geräuschpegel bei Betrieb (dB)	48	48
Montagedauer (Min.)	20-30	20-30
Normkabel CE mit Erdung	JA	JA

Masse in mm	Länge	Breite	Höhe
innen	975	560	740
aussen	1000	600	1030

Verpackung	Volumen	Bruttogew.*	Nettogew.*
	0,50 m ³	91 kg	64 kg

* ohne Filter

Zusatz-ausrüstung

- **Movilair**
Fahrbares Tischgestell
- **Unterrichtsmodell**
Transparente Rückwand
- **Modulare Bauweise**
Modulare Verbindung von Abzügen
- **Gasspürpumpe**
Überprüfung des Filtersättigungsgrades
- **125 V-60 Hz**

Ausstattung

- Beleuchtung
- Anemometer
- Arbeitsfläche aus Sicherheitsglas
- Auffangwanne für 2 l Flüssigkeit
- Alarm bei Ausfall des Ventilators
- Fronttüröffnungsalarm
- Vorrichtung zur Überprüfung der Filtersättigung
- 3 Jahre Garantie

